

FAIXAS TÉRMICAS THEMACARE®

COMODIDADE PARA MELHORES RESULTADOS

Os resultados bem-sucedidos de ThermaCare® na gestão da dor devem-se, em parte, ao seu excepcional carácter prático, que é proporcionado pelas seguintes características.

1

FACILIDADE DE UTILIZAÇÃO

A utilização de faixas térmicas não requer treino nem a aprendizagem de instruções complicadas. Tem de realizar os seguintes passos simples para tirar o máximo proveito de ThermaCare®:

Abra




a embalagem da faixa térmica e esta começará automaticamente a emitir calor.

Prenda



a faixa ao corpo com a superfície escura virada para a pele.

Ajuste

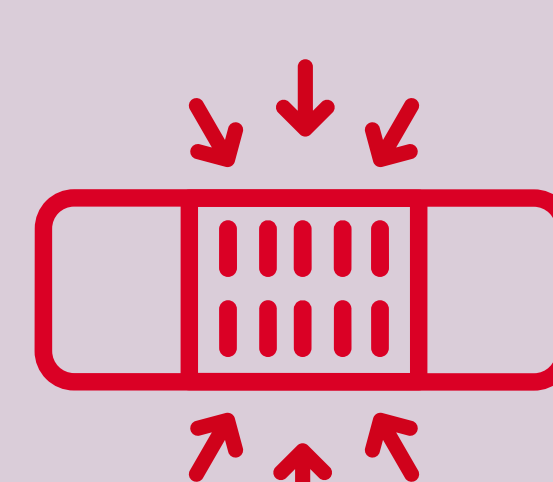

até ficar confortável, evitando apertar demasiado.

2

UMA VEZ AO DIA

Usar as faixas térmicas ThermaCare durante 8 horas por dia proporciona alívio prolongado da dor até 16 horas¹.

As faixas térmicas podem ser usadas enquanto dorme para proporcionar alívio da dor durante todo o dia seguinte². Se tiver 55 anos ou mais, deve usar por cima de uma toalha ou pano e não diretamente em contacto com a pele.

3

DISCRETO

Todas as faixas térmicas são muito finas, o que as torna quase invisíveis por baixo da roupa. Nem os doentes nem as outras pessoas irão reparar que estão a ser usadas.

4

CONFORTÁVEL

- **Indolor.** As faixas térmicas são feitas de materiais semelhantes a um tecido macio, o que, juntamente com o calor transmitido, proporciona uma sensação reconfortante e agradável.
- **Adaptável.** As faixas térmicas estão disponíveis em vários formatos para garantir uma adaptação perfeita em qualquer área do corpo, incluindo faixas especialmente concebidas para a zona lombar, bem como para o pescoço, punho ou ombros.
- **Resistente.** As faixas térmicas destinam-se a proporcionar uma fixação duradoura ao corpo, para que possam ser usadas durante as atividades diárias.

TMC 23-01/21

REFERENCES

1. Nadler SF, Weingand K, Kruse RJ. The psychologic basis and clinical applications of cryotherapy and thermotherapy for the pain practitioner. Pain Physician 2004; 7:395-399 * Benefício não avaliado no punho e formato versátil

2. Nadler SF, Steiner DJ, Petty SR, Erasala GN, Hengehold DA, Weingand KW. Overnight use of continuous low-level heatwrap therapy for relief of low back pain. Arch Phys Med Rehabil [Internet]. 2003 [citado em 2 de setembro de 2020];84(3):335-342. Disponível em: <https://doi.org/10.1053/apmr.2003.50103>

ThermaCare é um dispositivo médico eficaz no alívio da dor muscular e das articulações. Verifique periodicamente a pele e, caso detete sinais de irritação ou queimadura, remova imediatamente o produto. Antes de usar, leia atentamente a rotulagem e as instruções de utilização.